

プルダウンにてカテゴリを選択してください▼

#### 4.見守り支援

12.その他の内容

1.移乗支援 2.移動支援 3.排泄支援 4.見守り支援 5.入浴支援 6.機能訓練支援 7.服薬支援 8.認知症セラピー支援 9.食事支援  
10.口腔ケア支援 11.介護業務支援（掃除、洗濯、調理、記録等） 12.その他

### 機器情報

## 睡眠見守りシステム「みまもりずむ」

株式会社中日諏訪オプト電子

◆型番 CS-1000

◆TAISコード

#### ◆機器の特長と仕様（300文字まで）

##### ■見守り


ベッドのマットレスの下にセンサーマットを置くだけで、利用者様の睡眠状態や起き上がりを検知し、リアルタイムに確認ができる見守りシステムです。

##### ■体動測定

睡眠時の生体情報(呼吸、心拍)のデータを蓄積、解析することで、睡眠クオリティの評価を行うことができ、利用者に合わせてケアプランの作成に活用できます。

##### ■システム構成

サーバーをローカルに設置することで、施設内のみで複数のセンサーのモニタリングや情報管理が可能になります。また管理サーバーをインターネットにつなぐことで、介護スタッフ、家族へのメール配信が可能になります。

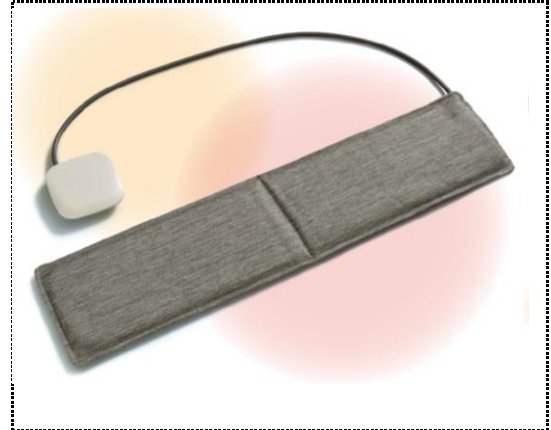

#### ◆主な対象者（150文字まで） ※適用可能な人の状態像を記述してください。

- ・就寝中に見守りが必要な方を介護する方
- ・睡眠クオリティの評価を行い、介護や健康へのケアプランに役立てたい方
- ・検知の速い睡眠見守りシステムを探している方

#### ◆販売価格

オープン価格（税抜）

#### ◆販売開始時期

令和 1 年 12 月

#### ◆販売実績台数

非公開

#### ◆機器紹介URL

<http://www.chunichi-suwa.jp/product/cs-1000/index.html>

#### ◆機器紹介動画

※動画がある場合は別途添付してください

#### ◆機器の貸出について（貸出を希望される方は下記の間合せ先までご連絡ください）

項目	対応可否	貸出期間	利用料 目安 (税抜)	利用条件など
1 イベントや研修会等での一時貸出	○	1週間程度	0円	ソフトウェアをインストールするパソコンおよび有線LANの環境をご用意ください。
2 機器導入を前提とした施設への試用貸出	○	応相談	0円	ソフトウェアをインストールするパソコンおよび有線LANの環境をご用意ください。

#### ◆問合せ先

株式会社中日諏訪オプト電子

中日電子カンパニー

営業部営業課 間瀬 英男

〒457-0078

TEL : 052-891-8997

／FAX : 052-891-7345

／E-MAIL : mase-hi@th-grp.jp

#### ◆担当者からのPRコメント（50文字まで）

検知の速さ（最速3秒）、睡眠の質の詳細な解析、ゆらぎ健康度が特色の睡眠見守りシステムです。